


Cintura Per Bagno Aeromesh® Rapid-Dry

IN UNICO PEZZO E ISTRUZIONI PER L'UTENTE

ART NOS. BB111 & BB112

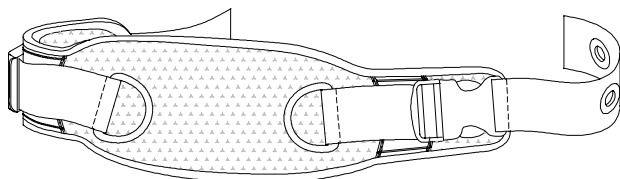

Queste istruzioni forniscono informazioni importanti per la sicurezza d'uso e la manutenzione di tutte le cinture per bagno Aeromesh® Rapid-Dry Bodypoint. Consegnare le istruzioni all'utente o al suo assistente e verificare che le abbiano comprese.

⚠ ATTENZIONE! A causa del rischio di soffocamento, è pericoloso utilizzare le cinture toraciche senza stabilizzare la pelvi; utilizzare sempre con una cintura di supporto della coscia o del ginocchio correttamente indossata.

La minuteria opzionale Bodypoint per il montaggio della cintura è utilizzabile per il montaggio su carrozzina o sistemi di seduta.

USO PREVISTO:

⚠ ATTENZIONE! Il prodotto è destinato unicamente al posizionamento di una persona su sedia per doccia/da comodo. Il prodotto NON è destinato all'uso come dispositivo di sicurezza per il trasporto, come dispositivo di immobilizzazione per la sicurezza o per qualsiasi altra applicazione in cui il mancato funzionamento potrebbe provocare lesioni. L'uso non appropriato del prodotto è vietato e pericoloso.

⚠ ATTENZIONE! Questa cintura di posizionamento deve essere montata correttamente per sostenere il corpo dell'utente senza causare lesioni. Farsi mostrare dal proprio specialista della postura seduta la regolazione e l'uso corretti.

- Se è troppo stretto sulle spalle e sul torace, può ostacolare la respirazione e aumentare la pressione.
- Se è troppo allentato, potrebbe far scivolare l'utente in basso e creare rischi di strangolamento.
- Lo sgancio accidentale di questo prodotto può far cadere l'utente in avanti o farlo cadere dalla sedia per la doccia/il water.
- L'incapacità di un utente di sganciarsi può essere pericolosa se l'utente scivola verso il basso o rimane intrappolato sulla sedia per la doccia/il water in caso di emergenza.

Se le capacità fisiche o cognitive dell'utente non gli consentono di utilizzare questo prodotto in modo sicuro, è necessario che un assistente sia sempre

presente durante il suo utilizzo. Verificare che tutti gli assistenti sappiano come regolare correttamente e slacciare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE! Se si verifica un incidente grave correlato all'uso di questo prodotto, deve essere segnalato al produttore (Bodypoint, Inc.) e all'autorità competente locale.

CONTROLLI PERIODICI DI SICUREZZA E DI EFFICACIA: Per garantire la sicurezza dell'utente, questo prodotto deve essere controllato periodicamente per verificarne il funzionamento e i segni di usura. Se il prodotto non funziona correttamente o se si riscontra un'usura significativa nelle fibbie, nei punti di montaggio, nelle fettucce, nelle imbottiture o nelle cuciture, interromperne l'utilizzo e contattare il fornitore per una riparazione da parte di personale qualificato o per la sostituzione da parte di Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!

🧺🔄🧼📧 LAVAGGIO ORDINARIO: Lavaggio in lavatrice, a caldo, 60 °C (140°F), detersivo per bucato. Asciugare in asciugatrice o all'aria aperta. Non stirare.

SCARTO/SMALTIMENTO: Il prodotto è realizzato in materiali che possono essere smaltiti in modo sicuro senza particolari precauzioni al termine della sua vita utile.

GARANZIA: Il prodotto è coperto da una garanzia a vita limitatamente a difetti nei materiali e nella fabbricazione che sorgessero con un normale utilizzo da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint, Inc.

Per maggiori informazioni su questo o su altri prodotti Bodypoint, e per un elenco di distributori al di fuori degli USA, visitare www.bodypoint.com

 **Bodypoint**®



EC REP

Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands

CE

MD Dispositivo medico

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

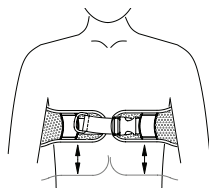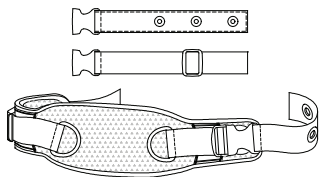


LA CONFEZIONE CONTIENE

La confezione può contenere uno o più dei seguenti articoli:

- cintura per bagno Aeromesh® Rapid-Dry
- cinghie di montaggio con occhielli, oppure
- cinghie di montaggio con regolatori di scorrimento
- Opzionali: morsetti telaio (Art. No. HW310), morsetti fascia (Art. No. HW320), manopola (Art. No. FA812-BP)

POSIZIONAMENTO

Invitare l'utente a sedersi in una sedia per doccia/comoda in posizione corretta. Stabilire la posizione desiderata per la cintura. Scegliendo la posizione, tenere in considerazione le interferenze con gli altri dispositivi. Per ridurre il rischio di strangolamento e d'instabilità del tronco, la cintura non deve essere né troppo alta né troppo bassa.

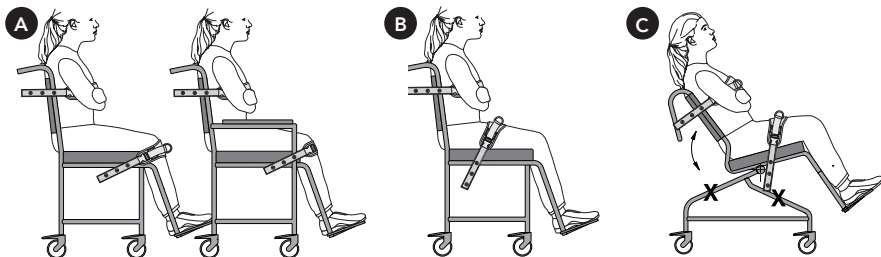

ISTRUZIONI DI FISSAGGIO




A Al torace, Al ginocchio (consigliata)

A seconda delle esigenze dell'utente, cercare una posizione ideale per il fissaggio alla sedia a rotelle che consenta di fissare la cintura a una delle posizioni preferite, mostrate in figura.

B Lungo le cosce (Opzionale)

C Carrozine basculanti

Le cinture devono essere fissate sulla parte superiore del telaio, in prossimità del punto di articolazione. Il fissaggio della cintura al di sotto di questo punto potrebbe causare interferenze o compromettere la tensione della cintura.

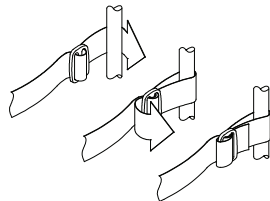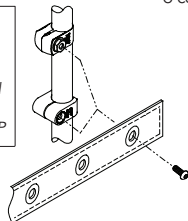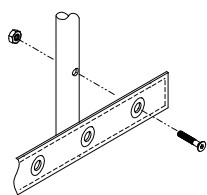

INSTALLAZIONE


Fissaggio diretto a vite

Per montare direttamente al telaio della sedia o a schienali rigidi, utilizzare viti a testa piana svasata o bombata da 6 mm (1/4-20). Le viti di montaggio devono avere una forza minima di estrazione di 90 kg (200 lb). Non incluse nella confezione.

Con morsetti telaio o morsetti fascia

Fissare i morsetti della sedia per doccia/comoda nei punti previsti e serrare in posizione. Inserire la seconda vite nell'occhiello della cinghia e nel morsetto. Serrare con fermezza.

Montaggio con regolazione scorrevole

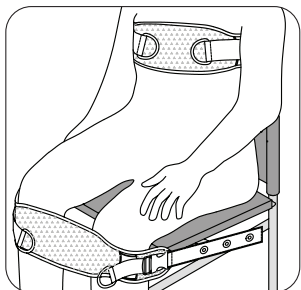

REGOLAZIONE

Con l'utilizzatore seduto in posizione corretta, verificare l'aderenza della cintura: dovrebbe essere sufficientemente aderente e assicurare al contempo la sicurezza dell'utente. Regolazioni minime della cinghia si ottengono utilizzando le cinghie di serraggio con l'anello a D. Regolazioni più grandi si ottengono con gli occhielli di montaggio.

CONTROLLO DI SICUREZZA

Dopo che l'utente si è seduto correttamente sulla sedia, farlo sporgere in avanti e di lato per controllare la vestibilità. Controllare quanto segue:

1. Il normale funzionamento della fibbia e delle cinghie di regolazione.
2. La comodità: individuare eventuali aree che possono essere soggette a irritazioni.
3. La posizione: se troppo alta o troppo bassa, regolare i punti di fissaggio.
4. Interferenza con altri dispositivi: riposizionare i punti di fissaggio secondo la necessità.
5. Fare compiere alla sedia spostamenti completi, compresi inclinazione, piegamento e rotazione. Controllare che non vi siano interferenze.